


# Hallo digital!

Digitalisieren Sie Ihre Präanalytik




# Win-win

## Unser pre-Barcode und Ihr Laborinformationssystem

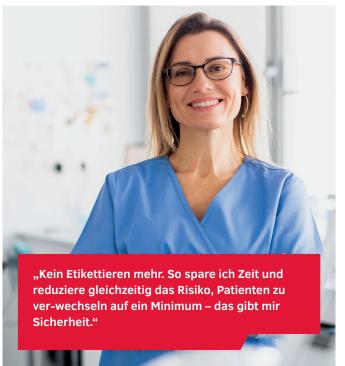





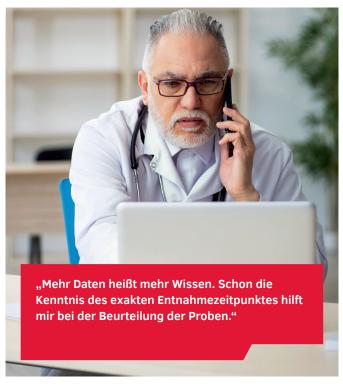


Das Zusammenwirken von pre-Barcode Probenröhren und einem Laborinformationssystem (LIS) ermöglicht eine Digitalisierung Ihrer Präanalytik. Bei dieser Prozessoptimierung steht die Sicherheit an erster Stelle, da durch den Entfall des lästigen und fehleranfälligen Etikettenklebens einer möglichen Patientenverwechslung vorgebeugt werden kann und Ihr Personal entlastet wird.

Machen Sie sich darüber hinaus die Digitalisierung zu Nutze, um umfassende präanalytische Daten zu sammeln. Die Bestätigung der Patientenidentität oder der exakte Entnahmezeitpunkt sind dabei nur einige Beispiele.

Digitalisieren Sie Ihre Präanalytik mit SARSTEDT. Hallo digital!

#### Prozess digitale Präanalytik mit vorbarcodierten Probenröhren

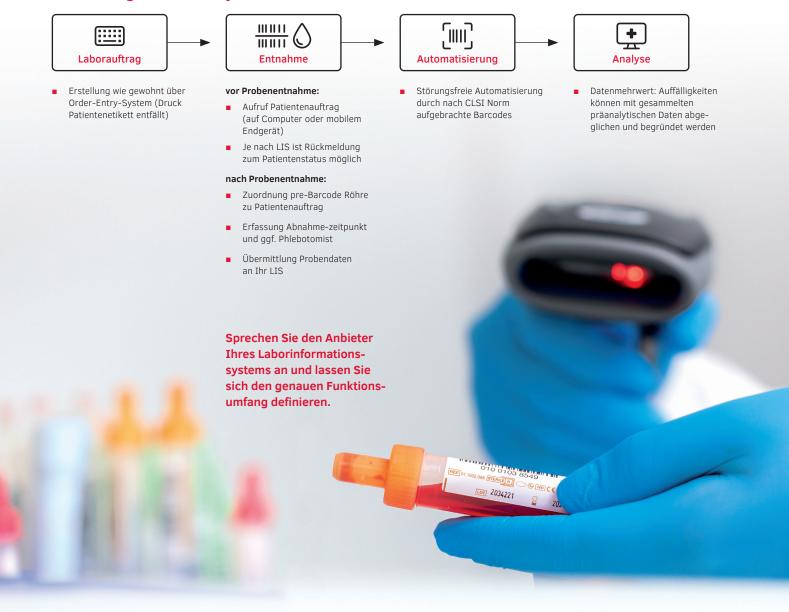

# pre-Barcode

### Der nächste Schritt zur digitalen Präanalytik

Mit pre-Barcode Probenröhren machen Sie den nächsten Schritt in die digitale Zukunft Ihrer Präanalytik. Minimieren Sie Fehlerquellen, verschlanken Sie Prozesse und sichern Sie die Qualität Ihrer Proben.



#### Einfach sicher

- Die direkte Zuordnung von Patient zu Probe verhindert die Verwechslung aufgrund falsch geklebter Etiketten. Dies erhöht die Sicherheit Ihrer Patienten und spart Ihnen wiederholte Probenentnahmen.
- Ihre automatisierte Abarbeitung der Probe im Labor wird durch vorbarcodierte Probenröhren und dem damit optimal platzierten Barcode unterstützt – Probenröhren ohne oder mit falsch geklebtem Barcode gehören der Vergangenheit an. Ihre Automatisierung wird beschleunigt, die Fehleranfälligkeit reduziert.
- Vorbarcodierte Probenröhren werden digital mit einem Patientenauftrag verknüpft. Das ermöglicht die Sammlung präanalytischer Daten. Auffälligkeiten in der Analyse können auf Basis dieser Daten abgeglichen werden.

## Die Prozessoptimierung beginnt schon vor der Probenentnahme

Das manuelle Erstellen und Aufkleben von Patientenetiketten auf die Probenröhren sowie die Zuordnung zum Patientenauftrag entfällt. Freiwerdende Ressourcen können anderweitig eingeplant und Kosten reduziert werden.

Greifen Sie bei der Entnahme einfach in den Karton mit den vorbarcodierten Probenröhren und nutzen eine beliebige S-Monovette® oder Urin-Monovette® für die Probenentnahme.






#### Aufbau & Systematik des pre-Barcode-Etiketts

- Auf dem Etikett wird ein 11-stelliger, nummerischer Barcode 128 verwendet.
- Ein 3-stelliger Präfix dient der Produktidentifikation.
- Eine 8-stellige Nummer stellt die eineindeutige Patientenzuordnung sicher.



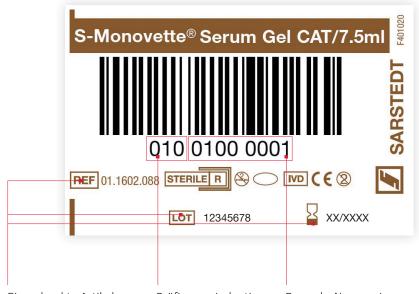

Eingedruckte Artikelnummer, Charge und Haltbarkeit zur visuellen Kontrolle

Präfix zur eindeutigen Unterscheidung der Probenröhre (z. B. 010 = 7.5 m)Serum-Gel)

Barcode-Nummerierung zur eindeutigen Zuordnung der Probe zum Patientenauftrag

# pre-Barcode von SARSTEDT

## So geht digitale Präanalytik

## Nutzen Sie alle Vorteile unserer vorbarcodierten Probenröhren

- Patienten- und Probenverwechslungen vermeiden
- Zeit und Ressourcen sparen
- Automatisierung optimieren durch nach CLSI AUTO02
  Norm aufgebrachte Barcodes
- Optimieren Sie Ihren präanalytischen Workflow mit der gewohnt hohen Qualität der S-Monovette<sup>®</sup> und Urin-Monovette<sup>®</sup>






# **Preanalytic Workflow** made by SARSTEDT

Nutzen Sie die Synergie unserer aufeinander abgestimmten Systeme.



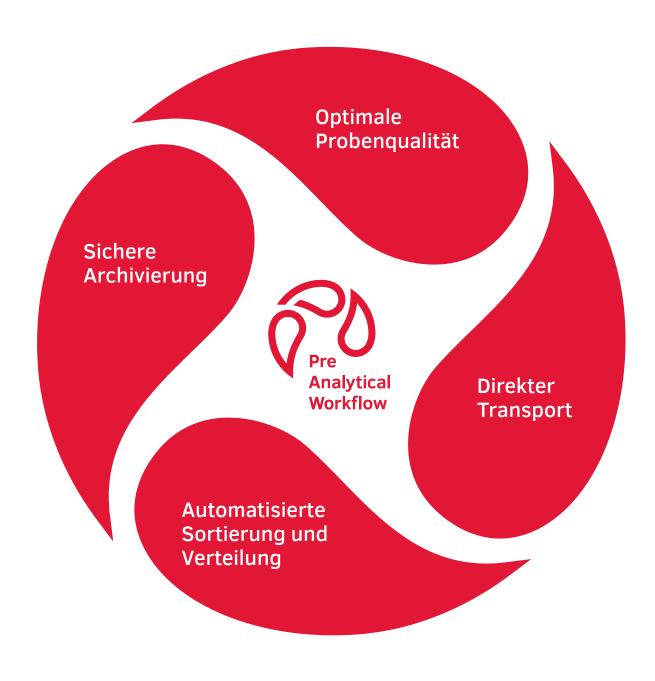

## Wenn Sie Fragen haben: Wir helfen Ihnen gerne weiter!

Besuchen Sie auch unsere Internetseite: www.sarstedt.com

#### **SARSTEDT AG & Co. KG**

Sarstedtstraße 1 D-51588 Nümbrecht

Tel.: +49 2293 305 0 Fax: +49 2293 305 3450

Kundenservice Deutschland Telefon 0800 0 83 305 0

info@sarstedt.com www.sarstedt.com

