




Olá mundo digital!

Digitalize a sua pré-análise



Vantagens para todos

O nosso código de barras pré-etiquetado e o seu sistema de informações laboratoriais (LIS)

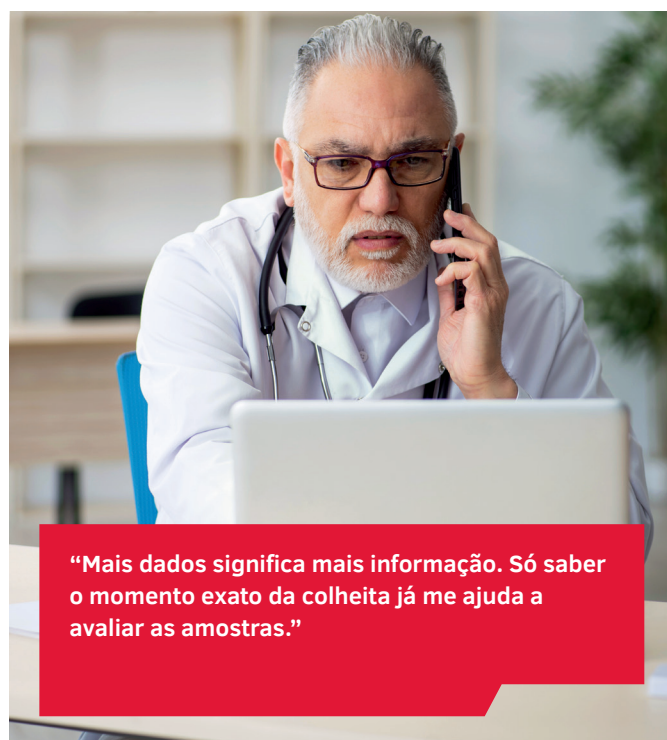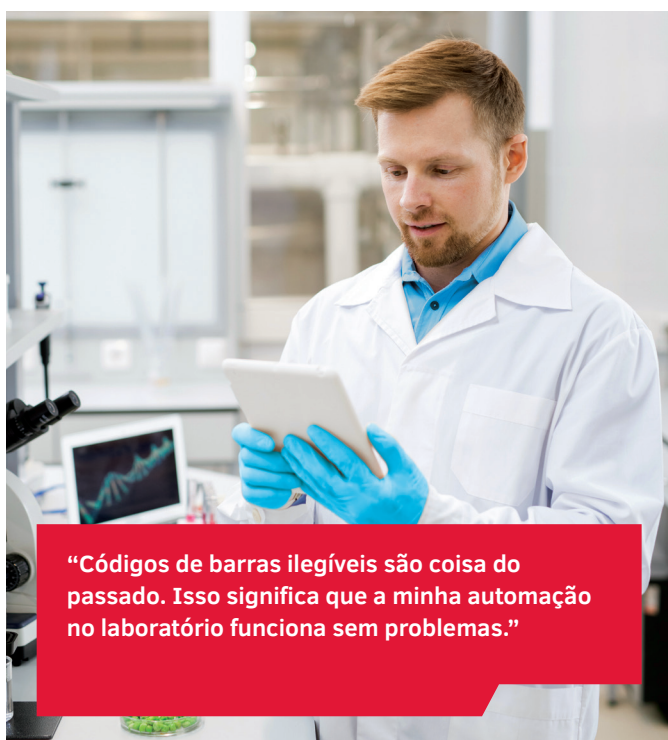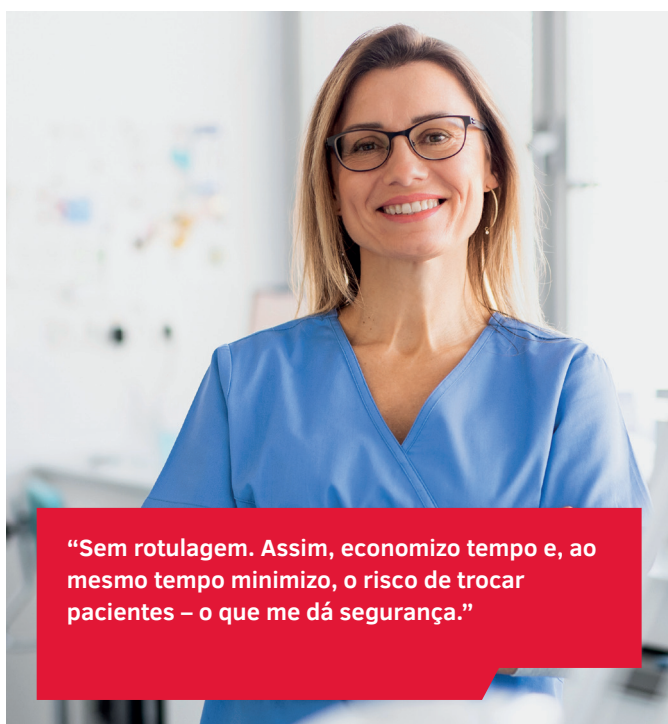

A interação entre tubos de amostra com código de barras pré-etiquetado e um sistema de informações laboratoriais (LIS) permite que as suas pré-análises sejam digitalizadas. Com esta otimização do processo, a segurança é a principal prioridade, pois a eliminação da colagem de etiquetas, trabalhosa e propensa a erros, pode evitar eventuais trocas de pacientes e reduzir a carga de trabalho da sua equipa.

Além disso, aproveite a digitalização para recolher dados pré-analíticos abrangentes. A confirmação da identidade do paciente ou a hora exacta da colheita são apenas alguns exemplos.

Digitalize as suas pré-análises com a SARSTEDT. Olá, mundo digital!

Processo de pré-análise digital com tubos de amostra com código de barras pré-etiquetado



- Criação, como habitualmente, através do sistema de Order-Entry (sem impressão do rótulo do paciente)

Antes da colheita da amostra:

- Consulta do pedido do paciente (em computador ou dispositivo móvel)
- Dependendo do LIS, é possível obter feedback sobre o estado do paciente

Após a colheita da amostra:

- Atribuição dos tubos com código de barras pré-etiquetado ao pedido do paciente
- Registo da hora da colheita e, se necessário, do flebotomista
- Transmissão de dados da amostra para o seu LIS

- Automação sem problemas através de códigos de barras aplicados de acordo com o padrão CLSI

- Mais-valia dos dados: As anomalias podem ser comparadas e justificadas com os dados pré-analíticos recolhidos

Fale com o fornecedor do seu LIS sobre a gama completa de funções.



Código de barras pré-etiquetado

O próximo passo para a pré-análise digital

Dê o próximo passo para o futuro digital da sua pré-análise com tubos de amostra com código de barras pré-etiquetado. Minimize as fontes de erro, agilize processos e garanta a qualidade das suas amostras.

Simplesmente seguro

- A atribuição direta do paciente à amostra evita trocas, devido a rótulos colados incorretamente. Isto aumenta a segurança dos seus pacientes e economiza a repetição de uma colheita.
- O processamento automatizado da amostra no laboratório é auxiliado por tubos de amostra com código de barras pré-etiquetado e, portanto, posicionados de maneira ideal – os tubos de amostra com ou sem códigos de barras colados incorretamente são coisa do passado. A automatização é acelerada e a possibilidade de erros é reduzida.
- Os tubos de amostra previamente identificados com código de barras devem ser associados digitalmente a um pedido do paciente. Isso permite a colheita de dados pré-analíticos. As anomalias na análise podem ser comparadas com base nesses dados.

A otimização do processo começa antes mesmo da colheita da amostra

A criação manual e a colagem de rótulos de pacientes nos tubos de amostra, bem como a atribuição ao pedido do paciente, deixam de ser necessárias. Os recursos libertados podem ser planeados de outra forma e os custos reduzidos.

Na colheita, basta colocar a mão na caixa com os tubos de amostra com código de barras pré-etiquetado e usar qualquer S-Monovette® ou Monovette® para urina para efetuar a colheita da amostra.



Código de barras pré-etiquetado SARSTEDT
sem colagem de rótulo, mais segurança, mais tempo para o que é importante – menos custos




Saiba mais sobre a pré-análise digital

sarstedt.com/digital-pt

Estrutura e classificação do rótulo do código de barras pré-etiquetado

- Um código de barras numérico “128” de 11 dígitos é usado no rótulo.
- É utilizado um prefixo de 3 dígitos para identificação do produto.
- Um número de 8 dígitos garante a atribuição inequívoca ao paciente.

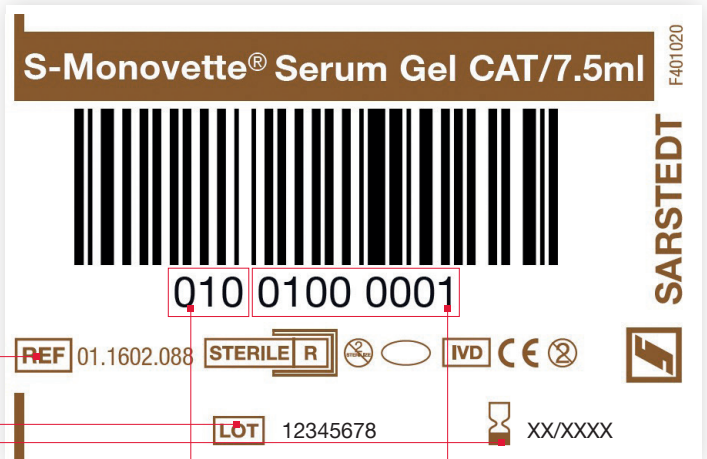

Impressão do número do pedido, lote e prazo de validade para controlo visual

Prefixo para distinguir claramente o tubo de amostra (por exemplo, 010 = 7,5 ml de soro com gel)

Numeração de código de barras para atribuir claramente a amostra ao pedido do paciente

Código de barras pré-etiquetado da SARSTEDT

É assim que a pré-análise digital funciona

Aproveite todas as vantagens dos nossos tubos de amostra com código de barras pré-etiquetado

- Evite confusões entre pacientes e amostras
- Economize tempo e recursos
- Otimize a automação através de códigos de barras aplicados conforme o padrão CLSI AUTO02
- Otimize o seu fluxo de trabalho pré-analítico com a alta qualidade habitual do S-Monovette® e Urine-Monovette®



Saiba mais sobre a pré-análise digital

sarstedt.com/digital-pt



Fluxo de trabalho pré-analítico da SARSTEDT

Utilize a sinergia de sistemas coordenados.

Descubra as soluções de 360° para os seus sistemas pré-analíticos da SARSTEDT



sarstedt.com/digital-wf-pt



Excelente
qualidade de
amostras

Arquivamento
seguro


Pre
Analytical
Workflow

Transporte
direto

Triagem e
distribuição
automatizadas

Em caso de dúvidas:
Teremos prazer em ajudar!

Visite o nosso site:
www.sarstedt.com

SARSTEDT S.A.

Sintra Business Park, Edifício 8
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 Sintra

Tel: +351 21 915 6010

Fax: +351 21 915 6019

info.pt@sarstedt.com

www.sarstedt.com



Weitere Informationen, Videos
und Beratung:
digital.sarstedt.com